




 **Riester**

The familiar way




Instrumentos para la veterinaria moderna.

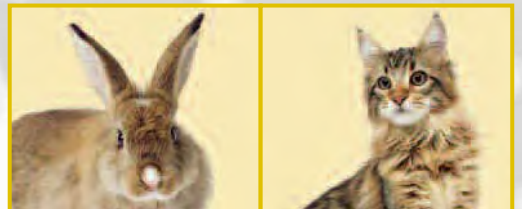

Instrumental veterinario

Instrumental veterinario

La amplia gama de productos Riester ofrece muchas y diferentes posibilidades para el uso en la veterinaria tanto en clínicas como en consultorios. Funcionalidad y calidad es lo principal para nosotros. Otros productos de nuestra completa gama que son aptos para el uso veterinario los encuentra en nuestros folletos para estetoscopios, lámparas y espejos frontales, lámparas de diagnóstico, laringoscopios, uni@/econom®, pen-scope® y ri-scope®, con gusto le enviamos estos folletos si usted los solicita.

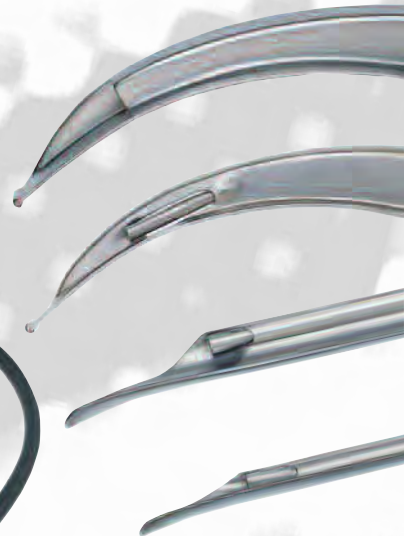

Otoscopios



Otoscopio quirúrgico ri-scope® (veterinario)

- Con lámpara de xenón XL de 3,5 V o lámpara halógena HL de 2,5 V.
- Lente pivotante de 2,5 aumentos.
- El soporte móvil del espéculo, con ranura, puede fijarse en cualquier posición.
- El diseño abierto permite trabajar sin obstáculos durante la exploración o la intervención.
- Cierre de bayoneta para una fijación rápida y segura al mango.
- Otoscopio quirúrgico completo fabricado en metal para una vida útil prolongada.
- Rápido cambio de lámpara en la parte anterior del otoscopio.


Nº 10541

HL 2.5 V

Nº 10542

XL 3.5 V

Accesorios

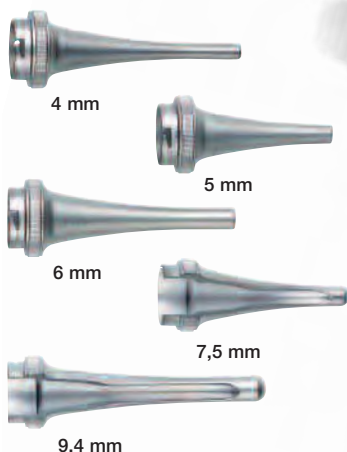

Espéculos reutilizables

para otoscopio quirúrgico ri-scope® (veterinario)

- Versión de alta calidad en metal cromado resistente al envejecimiento.
- Posibilidad de desinfección y esterilización mediante los métodos habituales.
- Las paredes interiores mates reducen los reflejos durante la exploración.
- Versiones con ranura: Manipulación óptima del instrumento gracias a la abertura con aristas especiales.

Espéculos metálicos

- Ø 4 mm, 83 mm de longitud
Nº 10881 1 unidad
- Ø 5 mm, 62 mm de longitud
Nº 10880 1 unidad
- Ø 6 mm, 82 mm de longitud
Nº 10882 1 unidad
- Espéculo metálico ranurado**
Ø 7,5 mm, 68 mm de longitud
Nº 10883 1 unidad
- Ø 9,4 mm, 92 mm de longitud
Nº 10884 1 unidad



Espéculos reutilizables

para otoscopio quirúrgico ri-scope® (para animales pequeños)

- Espéculos de plástico resistentes y duraderos con extremo metálico, para varios usos.
- Esterilizables en autoclave a 134° C durante 10 minutos.
- Disponibilidad de distintos tamaños: 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 9 mm.
- El espéculo de 9 mm puede utilizarse como espéculo nasal.
- Indicación del tamaño en cada espéculo.
- Suministrados en bolsas de polietileno.

Espéculos auriculares

- Ø 2 mm
Nº 10460 1 unidad
- Ø 3 mm
Nº 10461 1 unidad
- Ø 4 mm
Nº 10462 1 unidad
- Ø 5 mm
Nº 10463 1 unidad
- Espéculos nasales**
Ø 9 mm
Nº 10464 1 unidad

Soporte para depresor lingual



Soporte F.O. para depresor lingual ri-scope®

- Con lámpara de xenón XL de 2,5 V/3,5 V
- Fibra óptica de alta calidad para una concentración y transmisión óptimas de la luz. En combinación con la lámpara, proporciona una luz de exploración fría similar a la luz diurna, muy agradable para el paciente.
- Dispositivo deslizante para fijar y soltar el depresor lingual de madera, para una sujeción segura.
- Cierre de bayoneta para una fijación rápida y segura al mango.
- Carcasa de plástico ABS robusta y muy ligera, para una larga vida útil.
- Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del cabezal del instrumento.

Nº 10534

XL 2,5 V

Nº 10535

XL 3,5 V

Espéculo nasal



Espéculo nasal F.O. ri-scope®

- Con lámpara de xenón XL de 2,5 V/3,5 V
- Fibra óptica de alta calidad para una concentración y transmisión óptimas de la luz. En combinación con la lámpara, proporciona una luz de exploración fría similar a la luz diurna, muy agradable para el paciente.
- Lente pivotante desmontable de 2,5 aumentos.
- Expansión lenta y controlada del espéculo mediante giro del tornillo, expansión rápida mediante presión del tornillo hacia abajo.
- Cierre de bayoneta para una fijación rápida y segura al mango.
- Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, extremadamente resistente.
- Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del cabezal del instrumento.

Nº 10536

XL 2,5 V

Nº 10537

XL 3,5 V

Oftalmoscopios ri-scope® L



ri-scope® L Oftalmoscopios L1

- Con lámpara de xenón XL de 3,5 V o lámpara halógena HL de 2,5 V.
- Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande, estrella de fijación, rendija y filtro exento de rojo con intensificación del contraste.
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica
- Trayectoria paralela del haz
- Protección contra el polvo

Nº 10568

HL 2,5 V

Nº 10569

XL 3,5 V

Diafragmas y Filtros L1



Lentes correctoras L1

D+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	40	
D-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	35

Las lentes correctoras de +40 hasta -35 dioptrías garantizan una imagen nítida, incluso con anomalías de refracción muy pronunciadas.

Mangos

Mango para pilas tipo C con rheotronic®



para pilas alcalinas, baterías recargables de iones de litio y batería NiMH
Nº 10670

para pilas de litio
Nº 10630

Mango para pilas tipo AA con rheotronic®



para pilas alcalinas, baterías recargables de iones de litio y batería NiMH
Nº 10642

para pilas de litio
Nº 10643

Mango para enchufe con rheotronic®



230V
Nº 10638

120V
Nº 10639

Sets

Conjuntos confiables para uso en la veterinaria. Los conjuntos se suministran por principio sin pilas, ri-accu® y ri-charger®. Estos accesorios se representan bajo los números de artículo del conjunto y se deben pedir aparte. Debido al gran número de posibles combinaciones de instrumentos sólo se oferta una parte de los instrumentos en forma de conjuntos. Para información más detallada, por favor contactenos, nos complacerá enviarle la información necesaria.

• los instrumentos de 2,5 V/3,5 V con lámparas de xenón XL.

• Todos los conjuntos se suministran en elegantes estuches rígidos con cierres de seguridad.

• Gracias al cierre de bayoneta se pueden cambiar los cabezales de los instrumentos con una sola maniobra.



Otoscopio vet I, para animales más grandes

Otoscopio quirúrgico ri-scope® (veterinario)

- 1 espéculo metálico de cada uno de los siguientes tamaños:
 - Ø 4 mm, 83 mm de longitud,
 - Ø 5 mm, 62 mm de longitud,
 - Ø 6 mm, 82 mm de longitud.
- + espéculo metálico ranurado de cada uno de los siguientes tamaños:
 - Ø 7,5 mm, 68 mm de longitud,
 - Ø 9,4 mm, 92 mm de longitud.
- una lámpara de repuesto



Otoscopio vet I / oftalmoscopio, para animales más grandes

Otoscopio quirúrgico ri-scope® (veterinario), oftalmoscopio ri-scope® L1

- 1 espéculo metálico de cada uno de los siguientes tamaños:
 - Ø 4 mm, 83 mm de longitud,
 - Ø 5 mm, 62 mm de longitud,
 - Ø 6 mm, 82 mm de longitud.
- + espéculo metálico ranurado de cada uno de los siguientes tamaños:
 - Ø 7,5 mm, 68 mm de longitud,
 - Ø 9,4 mm, 92 mm de longitud.
- dos lámparas de repuesto



vet de luxe I, para animales más grandes

Otoscopio quirúrgico ri-scope® (veterinario), oftalmoscopio ri-scope® L1, soporte para depresor lingual ri-scope®, espéculo nasal de fibra óptica ri-scope®

- 1 espéculo metálico de cada uno de los siguientes tamaños:
 - Ø 4 mm, 83 mm de longitud,
 - Ø 5 mm, 62 mm de longitud,
 - Ø 6 mm, 82 mm de longitud.
- + espéculo metálico ranurado de cada uno de los siguientes tamaños:
 - Ø 7,5 mm, 68 mm de longitud,
 - Ø 9,4 mm, 92 mm de longitud.
- tres lámparas de repuesto

Mango para pilas tipo C con rheotronic®



Para 2 pilas alcalinas Tipo C o NiMH ri-accu® 2,5 V **N° 3850**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **N° 3851**
 Para 2 pilas de litio 3,5 V **N° 3852**

Para 2 pilas alcalinas Tipo C o NiMH ri-accu® 2,5 V **N° 3858**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **N° 3859**
 Para 2 pilas de litio 3,5 V **N° 3860**

Para 2 pilas alcalinas Tipo C o NiMH ri-accu® 2,5 V **N° 3866**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **N° 3867**
 Para 2 pilas de litio 3,5 V **N° 3868**

Mango para pilas tipo AA con rheotronic®



Para 2 pilas alcalinas Tipo C o NiMH ri-accu® 2,5 V **N°3853**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **N°3854**
 Para 2 pilas de litio 3,5 V **N°3855**

Para 2 pilas alcalinas Tipo C o NiMH ri-accu® 2,5 V **N°3861**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **N°3862**
 Para 2 pilas de litio 3,5 V **N°3863**

Para 2 pilas alcalinas Tipo C o NiMH ri-accu® 2,5 V **N°3869**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **N°3870**
 Para 2 pilas de litio 3,5 V **N°3871**

Mango para enchufe con rheotronic®



Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **230 V N°3856**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **120 V N°3857**

Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **230 V N°3864**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **120 V N°3865**

Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **230 V N°3872**
 Para iones de litio ri-accu® L 3,5 V **120 V N°3873**

Pilas, pilas recargables y Cargadores

Pilas: Pila alcalina tipo C (2 unid.)
 Pila de litio tipo C/AA (2 unid.)

N° 10686 para 2,5 V
N° 11287 para 3,5 V

Pila alcalina Tipo AA (2 unid.) **N° 10685 para 2,5 V**

Pilas recargables: Batería recargable NiMH ri-accu® tipo C
 Bat. recargable iones de litio ri-accu® L tipo C
 Bat. recargable iones litio ri-accu® L tipo C mango enchufe

N° 10681 para 2,5 V
N° 10691 para 3,5 V
N° 10692 para 3,5 V

Bat. recargable NiMH ri-accu® tipo AA **N° 10685 para 2,5 V**
 Bat. recargable iones de litio ri-accu® L tipo AA **N° 10690 para 3,5 V**

Cargador: ri-charger® para NiMH Accus

N° 10700 para 230V
N° 10701 para 120V

ri-charger® L para Li-ion Accus

N° 10705 para 230V
N° 10706 para 120V

Lámparas de repuesto

Otoscopio quirúrgico:	HL 2,5 V Caja de 6 unidades N° 10602	XL 3,5 V Caja de 6 unidades N° 10609
Espéculo nasal		
Soporte para depresor lingual:	XL 2,5 V Caja de 6 unidades N° 10600	XL 3,5 V Caja de 6 unidades N° 10607
Oftalmoscopios:	HL 2,5 V Caja de 6 unidades N° 10605	XL 3,5 V Caja de 6 unidades N° 10608

Rudolf Riester GmbH

Postfach 35 • DE-72417 Jungingen
 Alemania
 Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
 Fax: +49 (0)74 77/92 70-70
 info@riester.de
 www.riester.de